

取扱説明書

散薬混和器 ふりませ君

P B - 0 0 1



07,06-1

3. 注意点

- ・ 散薬を混和する目的以外でのご使用はご遠慮下さい。
- ・ 水洗いは出来ますが、アルコール・ベンジン等、有機溶剤等のご使用はしないで下さい。破損の恐れがあります。
- ・ 商品を落したり、硬い所へはぶつけないで下さい。破損の恐れがあります。
- ・ 熱は、避けて下さい。商品が変形する恐れがあります。
- ・ 付属のセラミックボール以外は使用しないで下さい。
- ・ 薬剤を混和・粉碎の際は必ず医師・薬剤師にご相談下さい。

4. 仕様

商品名	ふりませ君
品番	P B - 0 0 1
材質	上フタ・下フタ:ポリカーボネイト 中アミ:ポリプロピレン セラミックボール:セラミック
外寸	φ108mm H:89mm
重量	168g
耐熱	60度以下

5. 問い合わせ先

大同化工株式会社 <http://www.daido-kako.com/>

本社 〒570-0016 大阪府守口市大日東町3-4番2号

TEL 06-6901-1855 FAX 06-6901-1910


東京 東京都大田区蒲田5丁目9-4-201号

TEL 03-5703-1366 FAX 03-5703-1371

福岡 福岡市中央区警固2丁目13番7号701号

TEL 092-751-6210 FAX 092-751-0419

1. 各部の名称

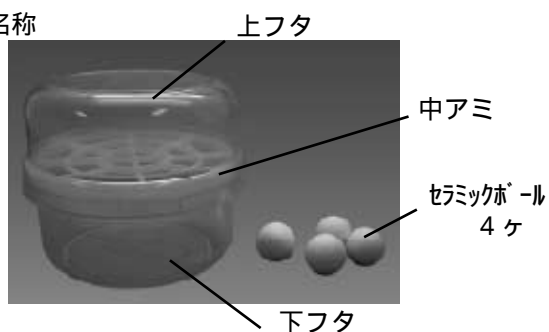


2. 使い方



上フタを外す。



中アミを外す。

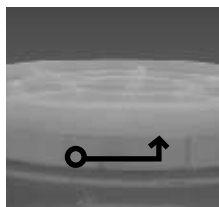

右に回して上へ外す。
(拡大図)




セラミックボールを入れる。



混和する散薬を入れる。



中アミを付ける。

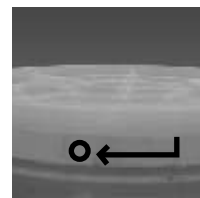

下に入れて左に
回してロックする。
(拡大図)



上フタを付ける。



容器を持ち振る。



上下逆さまにする。



下フタを開ける。



薬を取り出す。